

## MASCHERA FACCIALE FORMA MULTIMISURA RIUTILIZZABILE PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI



La nuova maschera Facciale FORMA™ garantisce aderenza e comfort ottimali grazie ad una più ampia possibilità di movimento dovuta alla conformazione attiva del nuovo cuscinetto FlexiFoam™. Il nuovo pezzo a T aggiunge stabilità alla struttura della maschera interagendo con il cuscinetto in silicone perfettamente conformato e col design sottostante. Grazie alla facilità di utilizzo e all'ottima conformazione del cuscinetto, la maschera facciale FORMA™ impone uno standard completamente nuovo.

Viene fornita completa in una scatola, già montata e pronta per l'uso.




Cuscinetto FlexiFoam™ a conformazione attiva.  
Il nuovo cuscinetto FlexiFoam™ garantisce un ottimo confort grazie alla particolare forma della parte interna, soffice, leggera e di sostegno. Il cuscinetto FlexiFoam™ a conformazione attiva si adatta naturalmente al viso del paziente.



Tecnologia FlexiFit™ (con cuscinetto interno in schiuma auto modellante).  
Il cuscinetto FlexiFoam™ utilizza la tecnologia FlexiFit™ per adattarsi automaticamente ad un'ampia gamma di profili nasali e facciali, si indossa con un semplice movimento e non richiede complicate regolazioni.



Struttura della maschera con pezzo a T.  
Senza complicate regolazioni, il pezzo a T fornisce stabilità alla maschera e insieme alla forma sottostante permette alla tecnologia FlexiFit™ di autoregolarsi per adattare la maschera senza problemi.

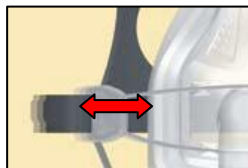

Fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido.  
La fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido garantisce un'ampia libertà di movimento e l'apertura della maschera con un solo movimento. La pressione della maschera resta costante quando la testa ruota da una parte all'altra, riducendo al minimo le perdite. Per togliere la maschera è sufficiente tirare il cordino a sgancio rapido.



Forma sottomento con fasce nucleari a corona.  
La forma sottomento garantisce maggiore stabilità alla maschera e mantiene l'aderenza anche con il movimento della bocca durante la notte.  
Le fasce a corona interagiscono con la forma sottomento eliminando la necessità di una fascia sottomento aggiuntiva.



Diffusore d'aria innovativo.  
Silenzioso, non richiede manutenzione.  
L'efficace sistema di diffusione dell'aria dirige il flusso d'aria lontano dal partner e minimizza il rumore del flusso in uscita che potrebbe disturbare il sonno.



Cuscinetto in silicone satinato.  
Cuscinetto con tecnologia di tenuta che assicura una sensazione di sofficià e morbidezza sulla pelle per un posizionamento ottimale; la sua tessitura satinata migliora l'aderenza della maschera.

#### Materiali:

Scocca della maschera:	Policarbonato (PC)
Cuscinetti facciali esterni (varie misure):	Silicone
Cuscinetti in schiuma interni (varie misure):	Schiuma di Poliuretano Valvola
Antisoffocamento:	Policarbonato (PC) / Silicone
Connettore a gomito:	Policarbonato (PC)
Appoggi frontali:	Silicone
Fascia a scorrimento Glider™:	Nylon (PA)
Fasce nucleari:	Breathe-o-prene™ (Lycra™/Poliuretano)

#### Caratteristiche della maschera:

- Pressione operativa: 3 – 25 cmH2O
- Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito: 192 cc

#### Resistenza al flusso:

- Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,4 cm H2O
- Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 1,4 cm H2O