


# FREESTYLE® COMFORT™

Concentratore di ossigeno portatile

## Il futuro è qui

Grazie alla forma ergonomica, il concentratore di ossigeno leggero ed economico FreeStyle® Comfort™ segue le curve naturali del corpo ed è comodo da indossare anche fuori casa. Approvato dalla FAA per l'uso sugli aerei commerciali e dotato di batterie sostituibili dall'utilizzatore, questo nuovo dispositivo per ossigenoterapia le consentirà di trascorrere periodi più lunghi fuori casa. Inoltre potrà contare su opzioni di estensione della garanzia per una maggiore serenità. Ora può aspettarsi di più dal suo concentratore di ossigeno portatile.

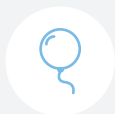

### UNA SOLUZIONE LEGGERA

Grazie a un peso di soli 2,3 kg (5 lb), FreeStyle® Comfort™ può seguirla ovunque lei decida di andare.


Sperimenti la comodità di un dispositivo indossabile che potrà trasportare con o senza custodie mediante una tracolla imbottita e antiscivolo.



### RESPIRI MEGLIO E SI PREOCCUPI MENO

La nostra tecnologia di rilevamento sensibile del respiro UltraSense™ assicura l'erogazione di ossigeno quando necessario.

Le batterie sostituibili dall'utilizzatore consentono di prolungare i periodi trascorsi fuori casa e di mantenersi attivi grazie a una carica che dura fino a 8 ore.

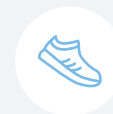

### COMODO DA INDOSSARE, FACILE DA USARE

Grazie al profilo curvo ed ergonomico che segue le curve naturali del corpo, il dispositivo è più comodo da indossare fuori casa.

L'interfaccia a colori di semplice utilizzo ridimensionerà le sue aspettative rispetto ai concentratori di ossigeno portatili.



Informazioni di contatto CAIRE:  
Numero verde +1.877.704.0878  
[www.cairemedical.com](http://www.cairemedical.com)

CONSULTI LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. Consulti le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2018 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati.

# FREESTYLE® COMFORT™

Concentratore di ossigeno portatile

## Comprende

- Concentratore portatile
- Borsa per il trasporto
- Borsa degli accessori
- Gruppo batterie
- Caricabatterie da tavolo del gruppo batterie
- Alimentatore universale CA/CC e cavi
- Tracolla
- Tecnologia UltraSense™
- Altri articoli disponibili

## Caratteristiche del prodotto

- Gruppo batterie sostituibile dall'utilizzatore, con durata della carica fino a 8 ore con l'impostazione 2
- Facile da indossare grazie alla tracolla
- Approvato dalla FAA per l'uso a bordo degli aerei commerciali
- Completamente utilizzabile con l'alimentazione a parete (CA) o dei veicoli a motore (CC)
- Interfaccia facile da usare

## Specifiche

**PORTATA**  
Impulsi 1-5

**DIMENSIONI**  
25,4 x 18,5 x 7,9 cm  
(10,0 x 7,3 x 3,1 pollici)  
Gruppo batterie a 8 celle

**PESO**  
2,3 kg (5 lb)  
Gruppo batterie a 8 celle

**LIVELLO SONORO**  
43 dB(A) con l'impostazione 2

**DURATA DELLA BATTERIA**  
Batteria singola con  
l'impostazione 2: fino a 4 ore  
Batteria doppia con  
l'impostazione 2: fino a 8 ore

**GARANZIA**  
3 anni su FreeStyle®  
Comfort™ (include i filtri)


1 anno su batteria e  
alimentatori



## Accessori disponibili



**GRUPPO BATTERIE  
A 8 CELLE**

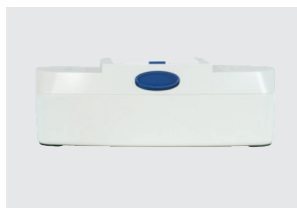

**GRUPPO BATTERIE  
A 16 CELLE**



**BORSA PER IL  
TRASPORTO**



**CARICABATTERIE DA  
TAVOLO DEL GRUPPO  
BATTERIE  
(OPZIONALE)**



**ALIMENTATORE CA  
(TUTTI I CAVI INCLUSI)**



**CAVO DI  
ALIMENTAZIONE CC**



**FILTRO ESTERNO  
PER PARTICOLATO  
GROSSOLANO**

### ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI:

- Tracolla
- Borsa per il trasporto degli accessori

## Caratteristiche e benefici principali



### Comfort ottimale

Lascia che i tuoi pazienti si godano il comfort della silhouette curva che aderisce alla forma del corpo. Il concentratore di ossigeno portatile FreeStyle Comfort è leggero e compatto.




### Erogazione intelligente di O<sub>2</sub>

Caratteristiche cliniche uniche, tra cui autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE e myCAIRE™ aiutano a garantire che i tuoi pazienti ricevano l'ossigeno di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.



### Saturazione corretta di O<sub>2</sub>

Con 5 impostazioni e fino a 1050 ml di ossigeno al minuto, il FreeStyle Comfort risponde a una vasta gamma di esigenze del paziente. L'unità eroga fino al 95% di ossigeno puro per garantire ulteriormente la corretta saturazione.

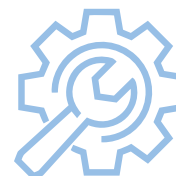

### Qualità collaudata

Le caratteristiche di design robusto, compresi la tecnologia dei setacci molecolari e i componenti critici, consentono una manutenzione minima e una lunga durata. CAIRE offre una delle migliori garanzie disponibili, con una garanzia di 3 anni sul dispositivo e sui setacci molecolari.

## Specifiche

### PORTATA

Dosaggio pulsato 1-5  
Impostazioni di uscita O<sub>2</sub>:  
Impostazione 1 - 210 ml/min  
Impostazione 2 - 420 ml/min  
Impostazione 3 - 630 ml/min  
Impostazione 4 - 840 ml/min  
Impostazione 5 - 1050 ml/min

### DIMENSIONI

25,4 x 18,5 x 7,9 cm  
Gruppo batterie a 8 celle  
27,9 x 18,5 x 7,9 cm  
Gruppo batterie a 16 celle

### PESO

2,3 kg  
Gruppo batterie a 8 celle  
2,7 kg  
Gruppo batterie a 16 celle

### LIVELLO SONORO

39,9 dB(A) all'impostazione 2

### SENSIBILITÀ DI ATTIVAZIONE

> -0,10 cm/H<sub>2</sub>O  
(regolabile)

### DURATA DELLA BATTERIA

Batteria a 8 celle  
fino a 8 ore  
Batteria a 16 celle  
fino a 16 ore

### ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA: 100-240 VCA,  
50-60 Hz  
Alimentazione CC: 11-18 VCC  
(10 A max)  
Batteria: Ioni di litio

### GARANZIA

3 anni  
(compresi setacci)  
1 anno su batteria e alimentatori



# FreeStyle® Comfort®

Apri la porta a una vita migliore  
e più piacevole

CAIRE®  
O<sub>2</sub> is what we do.

## BORSA PER IL TRASPORTO (tiene solo FreeStyle Comfort)

**Codice articolo**  
MI396-1



## CARICABATTERIE DESKTOP (batteria non inclusa)

**Codici articolo**  
BT036-1  
(spina di Tipo B)\*



BT036-2  
(spina di Tipo E)\*\*



## BORSA PER IL TRASPORTO DEGLI ACCESSORI (contiene unità e accessori)

**Codice articolo**  
MI372-2



**Cinturino di ricambio**  
**Codice articolo**  
MI397-1

## GRUPPO BATTERIE

**Codice articolo 8 celle**  
BT034-1S



**Codice articolo 16 celle**  
BT035-1S



## CAVO DI ALIMENTAZIONE PER VEICOLI (uscita di 12 VCC)

**Codice articolo**  
CDO41-1



## CAVO DI ALIMENTAZIONE AU

**Codice articolo**  
21347183



## ALIMENTATORE (120 W 15 V) (adatto a tutti i tipi di spine)

**Codice articolo**  
PW036-1



## ZAINO

**Codice articolo**  
MI459-1



## ADATTATORE DA VIAGGIO

**Codice articolo** 5591-SEQ



## ALIMENTATORE CON CAVO DI INGRESSO CA

**Codici articolo**

PW036-1S  
(spina di Tipo A)\*

PW036-2S  
(spina di Tipo C)\*



## CAVO DI INGRESSO CA

**Codici articolo**  
4997-SEQ (spina di Tipo A)\*  
4998-SEQ (spina di Tipo C)\*



## FILTRI PARTICOLATO GROSSO

**Filtro destro**  
**Codice articolo**  
FI226-1

**Filtro sinistro**  
**Codice articolo**  
FI227-1



\* Vedi <https://www.iec.ch/world-plugs> per dettagli sui tipi di spine.

\*\* Acquista 5591-SEQ insieme a questo articolo per adattare correttamente la spina alle prese di alimentazione IEC di Tipo I.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti FreeStyle Comfort e sugli accessori all'indirizzo

**CAIREinc.com**

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0138-5 E